

次世代型
電動車椅子

M4



[EMC-MR4型]



基本価格

790,000円~(非課税)

TAISコード:02162-000003



動画はこちら

充実した機能が
あなたを上質な生活へ



M4



標準装備



アームサポート高さ3段階の選択可能
ご自身の楽なアームサポートの高さになるように3段階から選択可能

操作ボックス左右の変更可能
操作ボックスは左右どちらでも設定可能



前輪メカナムホイール
全方向への移動がスムーズでその場での小回りが利くのが特徴

有料オプション


延長バックサポート

¥8,000-



坂道を検知し 自動角度調整機能

坂道を自動検知し、リアルタイムにシート角度を調整するためより快適な移動が実現。

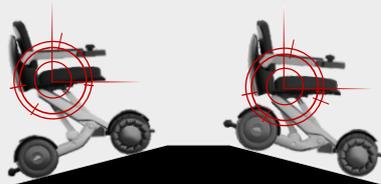

状況に合わせてシートの 電動昇降/ティルトで快適

電動昇降/ティルト機能で高いとこの荷物も様々な状況でもストレスフリーでとることができ快適さを提供。



安心安全を考えられた アプリ/スマートキー搭載

ワイヤレスでアプリ/スマートキーを使って鍵をかける機能があり、お出かけの時も安心。また、アプリによる簡単操作で遠隔の移動も可能。



※介護保険レンタルでアプリのご利用はいただけません

お出かけや収納時に便利な 格納/分解が可能

バックサポートの格納機能と3パーツに分解できるため、車に乗せてお出かけ先での快適な移動も実現。



◇外観寸法



◇標準仕様

仕様	型式	EMC-MR4		
寸法 (mm)	全長×全幅×全高 (昇降機能あり)	1,030×585×1,095(標準時)		
	全長×全幅×全高 (折りたたみ時)	1,040×585×580		
	シートからアームサポート(3段階調整)	120(標準±20)		
重量 (kg)	本体	53.8		
	バッテリー含む	56.5		
車輪径 (mm)	前輪 (メカナムホイール)	250		
	後輪 (パンクレスタイヤ)	250		
フレーム構造及び寸法 (mm)	シート奥行	440(フレーム)/400(クッション)		
	バックサポート幅	445		
	バックサポート高(3段階)	510/530(標準)/550		
駆動方式	前輪メカナムホイール、後輪直接駆動方式			
制動方式	モータ発電及び電磁ブレーキによる制動方式			
制御方式	ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御式			
バッテリー	リチウムイオン電池 DC25.55V 15.6Ah			
充電器 (充電時間)	電子タイマー付き自動充電方式 (5時間)			
速度 (km/h)	モード SE-ド (標準モード)	ギア	前進時	後進時
		1	1	0.3
		2	1.9	0.6
		3	3.3	1.1
		4	4.7	1.6
	NE-ド (初心者モード)	1	1	0.3
		2	1.4	0.5
		3	1.9	0.6
		4	2.8	0.9
		5	3.8	1.3
連続走行距離 (km)	15			
実用登坂角度 (度)	10			
段差乗越高さ：前進時 (mm)	50			
溝乗越幅 (mm)	150			
最小回転半径 (mm)	測定条件：フットサポートの最も外側の軌跡 820			
使用者最大体重 (kg) ※積載物含む	100以下			

安全にご使用いただく上での心得

- ご使用前には、取扱説明書を必ずお読みいただき、ご理解をされた上で安全にご使用ください。
- 電動車椅子以外の用途には使用しないでください。
- 電動車椅子は、道路交通法上歩行者として扱われます。歩行者としての交通ルールやマナーを守ってください。
- 走行中は、携帯電話やトランシーバーを絶対にしないでください。使用する場合は、安全な所に止めて電源を切ってから使用してください。

- 運転に慣れるまで、広い場所で十分に練習してください。
- 走行中は、携帯電話やトランシーバーを絶対にしないでください。使用する場合は、安全な所に止めて電源を切ってから使用してください。
- 次のような場所や状況下での走行は回避してください。
※人混み、交通量の多い道路、踏切、砂利道、でこぼこした道、防護柵のない道路の路肩、夜間走行、雨天、雪道、凍結路、濃霧、強風時、道幅の広い横断歩道、狭い道など



株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109

岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL(058)379-2756 FAX(058)379-2754

ホームページ <https://www.imasengiken.co.jp>

Eメールアドレス star@imasengiken.co.jp



お問い合わせ